

MONDHYGIËNE

Create it 

MONDHYGIËNE

NSK

Geavanceerde Mondverzorging Voor Tandartsen En Hygiënisten

Verwijderen van tandsteen en biofilm onder en langs de gingivarand, en reinigen en polijsten van tanden verbetert de resultaten van parodontale behandelingen aanzienlijk.

Het breed gamma van NSK producten voor mondhygiëne biedt een oplossing voor al deze situaties, om de tanden gedurende een lange periode gezond te houden, iets waar de patiënten veel belang aan hechten.

NSK ondersteunt uw dagelijkse, klinische routine met doeltreffende en gebruiksvriendelijke, professionele mondverzorgingsapparatuur zoals onze hoogwaardige ultrasone en poederapparaten.

INDEX

Varios Combi Pro	03 - 06
Ultrasone scalers	07 - 08, 13 - 14
Poederstralers	19 - 20, 23 - 24, 27 - 30
 Ultrasone NSK Oplossing	 07 - 08
 Varios Serie	 09 - 14
 Ti-Max S970	 15 - 18
 NSK Poederoplossing	 19 - 20
 Prophy-Mate neo	 21 - 22
 FLASH pearl	 23 - 24
 Perio-Mate	 25 - 30
 iProphy	 31 - 32
 Hoekstukken	 33 - 34
 Losse Onderdelen	 35 - 36
 Professionele Verzorging	 37 - 38

2 in 1

Ultrasonische Scaling en Poederbehandeling



Voor mondhygiënist, nieuw van nsk,
de wereldwijde nr. 1 in hoek-en handstukken.

Varios Combi Pro

Twée onderhoudssystemen in één

Combinatie van ultrasone scaling en poederbehandeling voor een meer effectieve, comfortabele mondhygiëne en beheersing van biofilm.



Ultrasonische scaling voor iedereen

Poederbehandeling voor supragingivaal gebruik

Poederbehandeling voor subgingivaal gebruik (als optie)

Innovatief nieuw design waarmee klinici twee toepassingen veilig en efficiënt kunnen combineren.

Twée systemen in één

NSK heeft één professionele behandel eenheid voor zowel ultrasone behandeling als poederbehandeling ontwikkeld. Deze eenheid stroomlijnt procedures en bespaart tijd en ruimte.

Stelt automatisch poederbehandelingsfuncties voor supragingivale of subgingivale toepassingen in

De clinicus hoeft alleen de juiste poederkamer aan te sluiten. De eenheid selecteert dan automatisch de functies voor supragingivale of subgingivale toepassingen. Dit voorkomt selectiefouten.

Zelfstandige eenheid en kamer

Doordat de kamer en het handstuk demonteerbaar zijn, kan de clinicus gemakkelijk wisselen tussen supragingivale en subgingivale toepassingen. Dit maakt de eenheid zeer gebruiks- en onderhoudsvriendelijk.

Geen verstoppingen meer

Doordat de bedieningseenheid, het handstuk en de slang van het handstuk gescheiden blijven, is er geen risico op poederverstoppingen meer. De componenten voor water en poeder zijn uitstekend toegankelijk voor onderhoud.

Houdt beide poedersoorten apart

Dankzij afzonderlijke kamers, handstukken en handstukslangen voor supragingivale en subgingivale procedures is er geen risico op vermenging van poeders of binnendringing van poeder in de bedieningseenheid.


Optimale hanteerbaarheid

Duidelijke Display


Een duidelijke display verbetert de veiligheid en efficiency doordat klinici snel kunnen vaststellen welk programma er draait: supragingivaal, subgingivaal of ultrasoon, welk van de 10 vermogensniveaus en sproeiwatervolume.

Groot LCD-paneel


Het Lcd-paneel Is Uitstekend Leesbaar, Contrasterend En Voorzien Van Een Speciale Coating Om Poederkrassen Te Voorkomen.

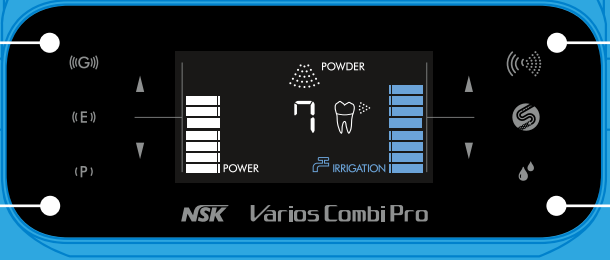


Ultrasoon

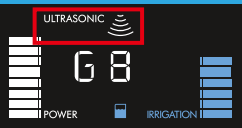


Poeder

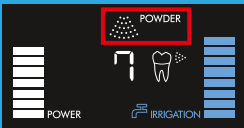

Supragingivaal

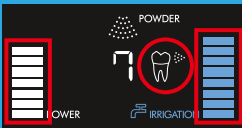

Subgingivaal

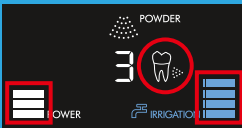

Automatisch Schakelen Tussen Ultrasoon en Poeder

Een automatische herkenningssensor schakelt tussen de ultrasone en poederfunctie wanneer u een handstuk van de houder pakt.

Opslag van Eerdere Instellingen

Het systeemgeheugen kan behandelparameters opslaan, zoals watervolume, luchtdruk en ultrasoon vermogen. U hoeft alleen het handstuk te pakken om over te schakelen naar de nieuwe instellingen.
*Voor de poederfuncties veranderen de instellingen bij vervanging van de poederkamer.

Gemakkelijk te onderhouden

Automatische reinigingsfunctie

De reinigingsfunctie reinigt automatisch het handstuk en de slang na ultrasone of poedertoepassingen. Tijdens de reinigingscyclus toont de display de resterende tijd van het proces, dat in totaal ongeveer 45 seconden duurt.

Gemakkelijk te onderhouden

Het mondstuk, het handstuk, de slang van het handstuk en de kamer zijn eenvoudig te demonteren.

Gladde oppervlakken voor eenvoudige reiniging

De behuizing is naadloos en glad, waardoor u poederresten gemakkelijk kunt verwijderen. De display is voorzien van een krasbestendige coating.

Regelt alle hoofdbewerkingen van procedures

Multifunctionele voetbediening

Bij de ontwikkeling van de Multifunctionele Voetbediening heeft NSK uitgebreid onderzoek gedaan naar voetbewegingen en gevoel, zodat klinici de eenheid handsfree kunnen besturen en de procedure niet hoeven te onderbreken. Met de voet kan de gebruiker schakelen tussen de ultrasone en poedermodus, het apparaat in- en uitschakelen en het vermogen aanpassen. In combinatie met een voetbeugel biedt deze voetbediening de mogelijkheid om volledig handsfree te werken.



Optioneel PERIO-SYSTEM

MODEL	REF
Varios Combi Pro Perio Set	Y1003042

Inhoud
• PERIO-KAMER • PERIO-slang • PERIO-handstuk • Perio-Mate mondstuktip
• Perio-Mate mondstuktipverwijderaar • Perio Mate poeder

Optioneel

MODEL	REF
iCart Prophy	S9095

• Afmetingen : B 450 x D 380 x H 660 mm
• Gewicht : 21 kg



Varios Combi Pro Basisset

Met Licht	MODEL	REF
●	Varios Combi Pro Basic Set	Y1002843

Inhoud
• PROPHY-handstuk met 60° mondstuk • PROPHY-slang • PROPHY-KAMER
• FLASH pearl (5 zakjes van 15 g) • Onderhoudsset • VA2LUX-handstuk
• VA2LUX-slang • 3 scaling inserts • Sterilisatiekoffer • Irrigatiefles (400 mL)
• Voetbediening

Specificaties
• Voeding : AC 100-240 V 50/60 Hz
• Frequentie : 28-32 kHz
• Afmetingen : B 225 x D 290 x H 162 mm (incl. kamer)
• Gewicht : 2,6 kg (zonder attachment)
• Flesvolume : 400 mL



iPiezo engine®

De unieke ultrasone AI motor reageert op intelligente wijze op de tandoppervlakcondities

"Ik zou graag beter scalen", "Ik zou afzettingen op een gemakkelijkere manier willen verwijderen"... Bij de ontwikkeling van onze unieke ultrasone AI motor, het centrale onderdeel van de Varios reeks, hebben we rekening gehouden met de meningen van de clinici. De bewegingen van de bediener worden nauwkeurig overgebracht naar de tip, als ware dit onderdeel een verlengstuk van de hand. Zo kan de behandeling worden aangepast aan de toestand van het tandoppervlak. De behandeling is sneller en minder onaangenaam voor de patiënt, en tegelijkertijd milieuvriendelijk omdat het apparaat correct werkt zonder veel stroom te verbruiken.



Voorzien van een ultrasone AI motor, de iPiezo engine®

unieke high-performance ultrasone piëzo motor van NSK zorgt voor een soepele werking omdat het de bewegingen van de gebruiker overdraagt naar de tip.

Feedback functie


De iPiezo technologie levert optimale kracht ter hoogte van de tip in functie van het tandoppervlak.

Autotuning functie

Deze functie laat toe om op elk moment de trilfrequentie van het handstuk aan te passen aan de condities in de mond, hetgeen een optimaal resultaat garandeert. Zelfs bij harde tandsteen blijft de frequentie optimaal en stabiel.


Geschikt voor gelijkmatig scalen

Conventionele ultrasone scalers verliezen kracht wanneer ze van zacht naar hard tandsteen worden verplaatst. De belasting aan het uiteinde van de tip wordt automatisch gedetecteerd door de Varios iPiezo waardoor gelijkmatige scaling zonder krachtverlies mogelijk wordt.

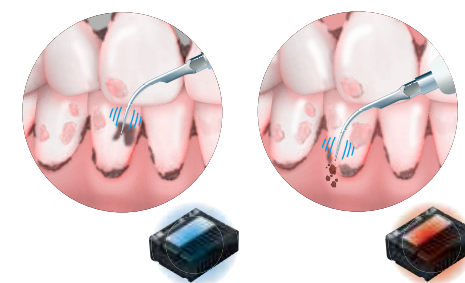

LED Een slank, uiterst ergonomisch LED-handstuk

Dankzij het slanke 9,5 mm uiteinde van het Varios2 LUX handstuk kunt u de hele mondholte goed bereiken. Het fijne handstuk zorgt ervoor dat zelfs de kiezen gemakkelijk te bereiken zijn. Het vergroot de bewegingsvrijheid in de mondholte zodat de tip altijd onder de juiste hoek kan worden geplaatst. Het ultralichte handstuk ligt goed in de hand en ontlast de handen en vingers. De verschillende led-verlichtingsniveaus bootsen natuurlijk licht na en zorgen voor optimale zichtbaarheid.

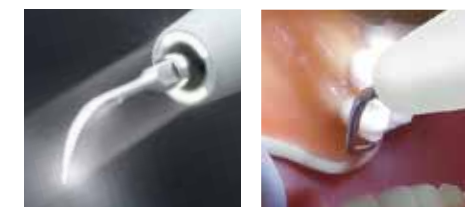

Sterilisatie in een autoclaaf en thermische desinfectie zijn allebei mogelijk. Het product voldoet aan de hoogste veiligheidsnormen




Sterilisatiekoffer

Het handstuk, de inserts en de sleutels kunnen eenvoudig samen worden gesteriliseerd.

Varios Serie

Wees slim.

NSK beschikt over een uitgebreid gamma van vooruitstrevende en intelligente, ultrasone behandelingsapparaten die zijn voorzien van unieke AI motoren van de volgende generatie en 70 verschillende tips.

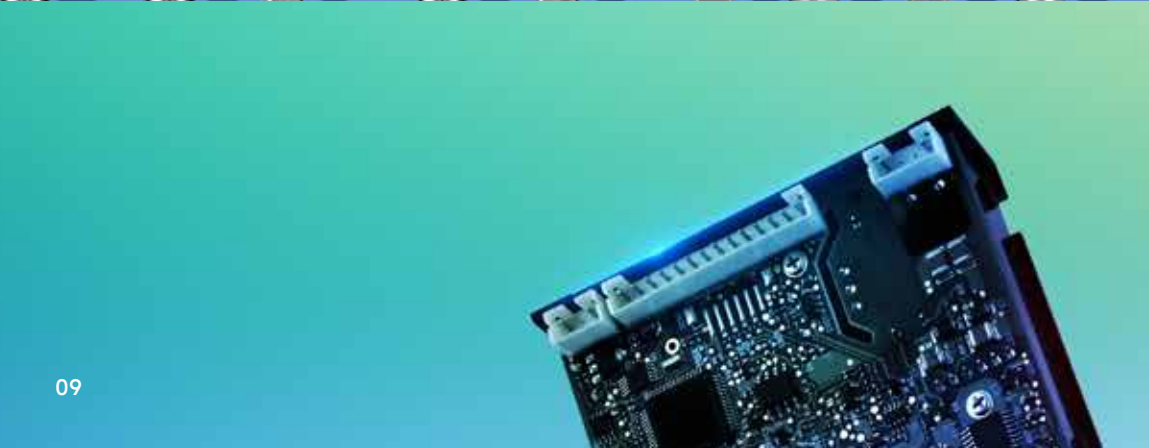

Varios 970

Optimale klinische veelzijdigheid

Het intelligente, compacte ontwerp zorgt voor indrukwekkende prestaties

Het meest geavanceerde model uit onze compacte reeks, de Varios 970I, beschikt over alle functies die nodig zijn voor ultrasone behandelingen. Ons 2-flessensysteem met hoge capaciteit geeft de gebruikers de mogelijkheid om zich op de veiligheid van de behandeling te richten zonder zich zorgen te hoeven maken over de waterkoeling. Eenvoudig dagelijks onderhoud met een automatische spoelfunctie en naadloos design. We hebben de feedback van de gebruikers grondig bestudeerd. Dankzij deze feedback kunnen we nu optimale bruikbaarheid en maximale veiligheid aanbieden.

Groot display

Op het grote LED-scherm staan een 10-delig cijferdisplay dat het vermogen aangeeft en een staafdiagram dat het irrigatievolume toont. De intuïtieve lay-out van de functietoetsen zorgt bovendien voor minder gebruiksfouten. De vermogensinstelling en functieselectie zijn gemakkelijk en betrouwbaar.



Grote flessen voor oplossing

De twee flessen kunnen gemakkelijk worden geplaatst en verwijderd en kunnen worden gevuld met eender welke vloeistof om de behandeling aan te vullen. Grote flessen van 400 mL voor een grote irrigatiecapaciteit en een korte behandelingsduur. Onze onderdelen en materialen werden grondig bestudeerd en herhaaldelijk getest waardoor hun duurzaamheid verzekerd is, zelfs bij intensief gebruik met antiseptische vloeistoffen.



Grotere bestendigheid tegen antiseptische oplossingen

De invoering van een waterslang, pomp en handstuk op harsbasis, verhoogt de duurzaamheid aanzienlijk aangezien de kans op corrosie en roest door resten van de antiseptische oplossingen wordt verkleind.




Zelfreinigend

De zelfreinigingsfunctie spoelt de leidingen, het handstuk en de inserts met één druk op de knop. Wanneer u speciale oplossingen heeft gebruikt, activeert u de zelfreinigingsfunctie van de Varios 970 om de twee waterkanalen afzonderlijk te spoelen.



Gemakkelijk vervangbare irrigatiepomp

Aangezien u de onderdelen van het irrigatiesysteem zelf kunt vervangen, kunnen de meeste reparaties ter plaatse worden uitgevoerd.

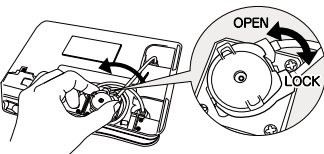

Varios 970 Complete Sets

Met Licht	MODEL	REF
●	VA970 LUX 230V S1	Y1004161
—	VA970 230V S1	Y1004160

Inhoud
• Bedieningseenheid • Handstuk • Snoer handstuk
• 3 scaling inserts (G4, G8, G16) • Voetbediening (FC-70) • 2 x Irrigatiefles
• 3 x dynamometrische sleutel om inserts te wisselen
• AC stroomsnoer • Sterilisatiekoffer

Specificaties
• Voeding : AC 230 V 50/60 Hz
• Frequentie : 28-32 kHz
• Max. output : 11 W (mode G)
• Afmetingen : B 160 x D 270 x H 190 mm (inclusief flessen)
• Gewicht : 2,1 kg (enkel unit)
• Flesvolume : 400 mL (x2 flessen)



Varios 370

Multifunctionele en compacte bedieningseenheid

De Varios 370 werd speciaal ontwikkeld tot een draagbare en compacte unit, die eenvoudig kan geïnstalleerd worden in alle installaties. Eenvoudig te gebruiken en geschikt voor allerlei klinische applicaties. Functie "P" voor Paro, "E" voor Endo en "G" voor algemeen.



Voordelen

- iPiezo technologie
- Draagbare, ultracompacte behuizing
- eenvoudig en intuïtief controle paneel

Installatievoorbeelden van Varios 370



Op de arm van het tablet (bevestiging optioneel).

Op/onder het tablet met bijgeleverde bevestiging.

Varios 370 Complete Set

Met Licht	MODEL	REF
—	VA370	Y1001340

Inhoud
• controleleenheid met snoer • houder controleleenheid • AC Adapter
• Handstuk • Handstuksteun • Waterfilterset • Voetbediening (FC-71)
• 3 tips (G4, G6, G8) • Dynamometrische sleutel om inserts te wisselen

Specificaties
• Voeding : AC 100-240 V 50/60 Hz
• Frequentie : 28-32 kHz
• Max. output : 11 W (mode G)
• Afmetingen : B 80 x D 115 x H 32 mm (zonder snoer en knop)
• Gewicht van de set : 0,43 kg (enkel unit)



Varios 570

Compact en multifunctioneel

Varios 570 biedt de keuze uit 3 programma 's in functie van de gewenste toepassing: "G" voor algemene toepassingen, "E" voor endo en "P" voor paro. Het niveau van de krachtoutput kan aangepast worden binnen elk toepassingsgebied. Bv. bij parodontologie kan de kracht tot een minimum beperkt worden, onmisbaar bij bepaalde paro behandelingen.

Voordelen

- iPiezo technologie
- compacte en handige vormgeving
- gebruiksvriendelijk en intuïtief controle paneel

Varios 570 Complete Set

Met Licht	MODEL	REF
●	VA570 LUX	Y1001273

Inhoud
• Controleleenheid met snoer • AC adapter • Handstuk • Waterfilterset
• Aansluiting water toevoer • Voetbediening (FC-70)
• 3 tips (G4, G6, G8) • Dynamometrische sleutel om inserts te wisselen

Specificaties
• Voeding : AC 100-240 V 50/60 Hz
• Frequentie : 28-32 kHz
• Max. output : 11 W (mode G)
• Afmetingen : B 160 x D 135 x H 65 mm
• Gewicht van de set : 0,43 kg



Varios 170

Geïntegreerde multifunctionele ultrasone scaler

De kleinste module om gemakkelijk in te bouwen in nieuwe en bestaande tandartsunits

De Varios 170 is 's werelds kleinste optische controlemodule voor inbouw. De module beschikt over de nieuwe iPiezo generator van NSK die garant staat voor een stabiele output op elk ogenblik. Het nieuwe slankere en extreem lichte handstuk met dubbele led lampen is gemakkelijk in te bouwen in een bestaande tandartsunit en wordt bediend via de bestaande pedaal.

Varios 170 Complete Sets

Met Licht	MODEL	REF
●	VA170LUXS8	Y1004145
—	VA170S8	Y1004144


Inhoud
• Inbouwmodule • Handstuk • Snoer handstuk • 3 tips (G4, G8, G16)
• 3 x dynamometrische sleutel om inserts te wisselen • Sterilisatiekoffer

Specificaties
• Voeding : AC 24 V ±10%
• Frequentie : 28-32 kHz
• Max. output : 11 W
• Afmetingen : B 63 x D 54 x H 26 mm
• Gewicht van de set : 59 g

Tip Assortiment

NSK beschikt over een uitgebreid gamma van ultrasonische tips voor klinische toepassingen

Er is een breed scala van tips voor de verschillende situaties en hoeveelheden tandplak.

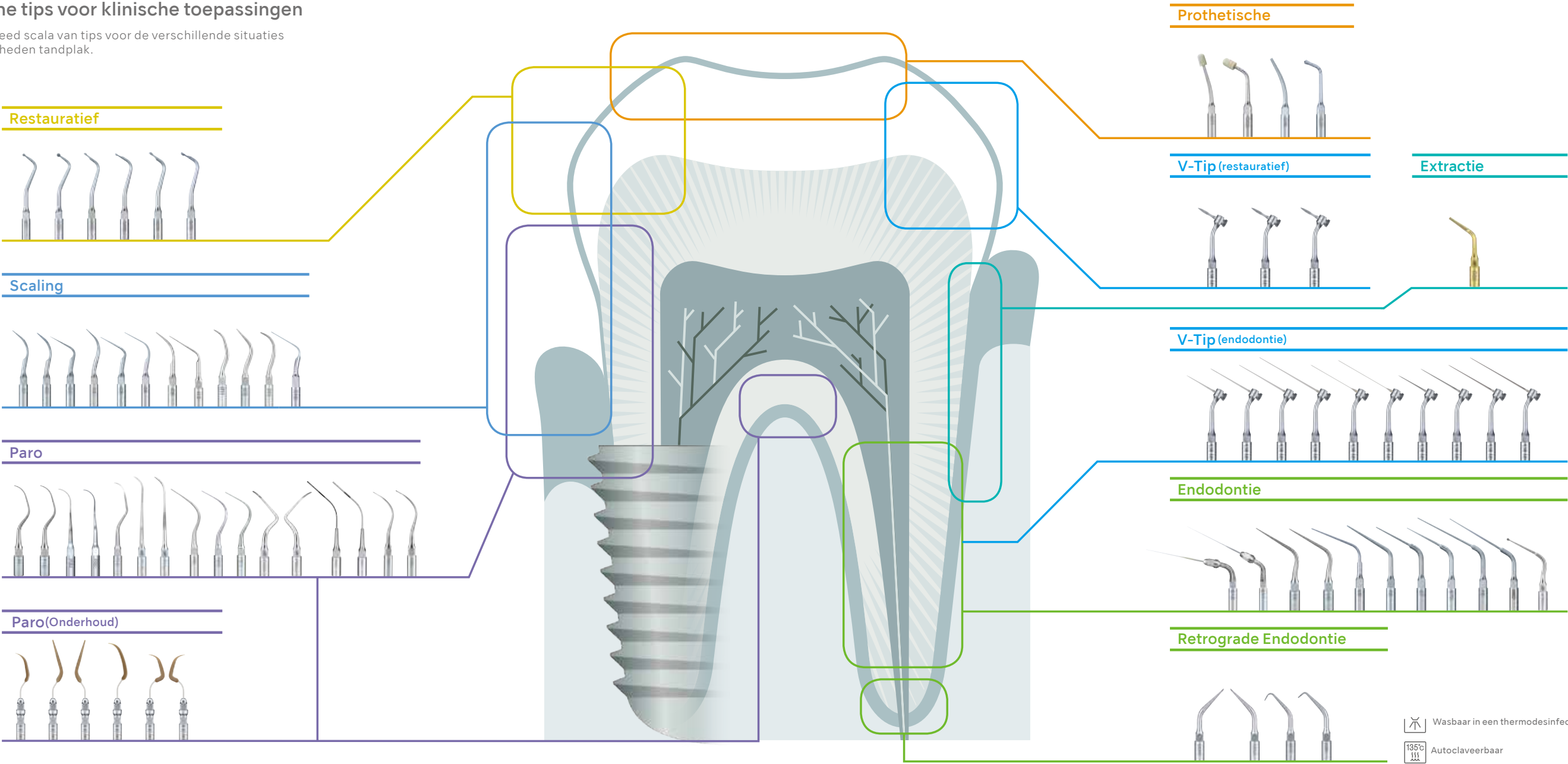

Scaling / parotip dwarsdoorsnede & kenmerken van de soorten tips

Het uiterlijk van de tips verschilt. Ook hun dwarsdoorsneden, materialen en oppervlakteafwerkingen variëren. De keuze van de tip hangt af van de concrete situatie en de hoeveelheid tandplak. Dit systeem staat garant voor extra doeltreffendheid zonder negatieve gevolgen voor het tandoppervlak of het zachte weefsel.

Dwarsdoorsnede / Tip	Materiaal / uiteinde tip	Resultaat van scalingbehandeling	Soort tand	Voor
 G1, G5, G6 G8, G9, G16	Metaalachtige glansafwerking			Scaling op en onder de gingiva
 P1, P20 P21R/L, P25R/L	Metaalachtige glansafwerking			Vlekverwijdering op en onder de gingiva / onderhoud
 P1D, P2D, P3D	Metaal- en diamantbewerking			Scaling onder de gingiva (aangrenzend oppervlak / bifurcatie)

Dwarsdoorsnede / Tip	Materiaal / uiteinde tip	Resultaat van scalingbehandeling	Soort tand	Voor
 P10 P11R/L, P26R/L	Metaalachtige scherpe rand			Scaling onder de gingiva
 P40, P41	Metaalachtige laterale tip, dubbele waterspray			Irrigatie
 V-P10, V-P11R/L V-P12, V-P26R/L	Plastic			Prothetische herstellingen Implantaten

Zie de tipgids voor details.



Ti-Max S970

Pneumatische Scalers


De Air scaler vervult een groot aantal verzorgende functies

De pneumatische S970-scaler biedt een groot bereik qua energie-output dmv. een eenvoudige rotatie van de afstellingsring. Er is een uitgebreid tipassortiment voor een breed toepassingsgebied, variërend van algemene scaling en wortelkanaalirrigatie tot minimaal invasieve procedures. Dankzij het grote aantal toepassingen, de comfortabele greep en onderhoudsvriendelijkheid is de pneumatische S970-scaler de beste keuze voor zowel tandartsen als mondhygiënisten. Dankzij een titanium behuizing en een glad, naadloos ontwerp is het behandelgebied altijd perfect zichtbaar.




Stabiele energie-output

De pneumatische S970-scalers leveren een stabiele energie-output en constante trilling in het gehele vermogensbereik op ongeveer 6.000 Hz. De pneumatische S970- scalers zijn perfect voor delicate procedures, waardoor ze ideaal zijn voor patiënten met parodontale problemen en gevoelige tanden.

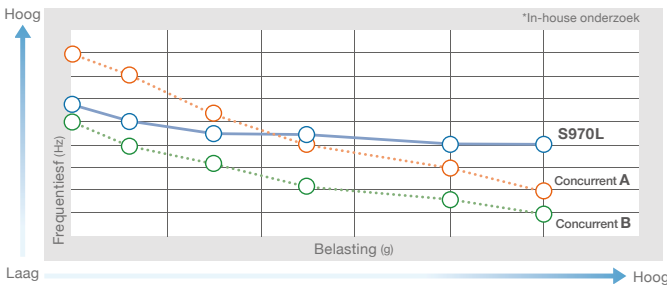

Uitstekende zichtbaarheid

Dankzij de slanke vormgeving van de S970 is het behandelgebied volledig zichtbaar en zijn zelfs de moeilijkst bereikbare plekken perfect toegankelijk.

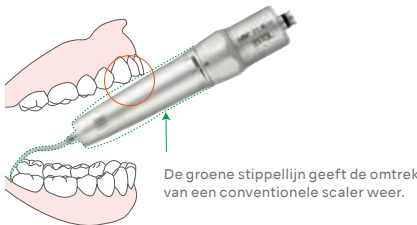

Eenvoudig regelen van de energie-output

De S970-serie beschikt over 3 verschillende instellingen om de energie-output aan te passen aan de klinische eisen. De laagste stand is voor delicate procedures, de hoogste stand is geschikt voor algemene scaling.



- Titanium behuizing met krasvrije DURACOAT
- Energie-outputinstelling met 3 standen • Quartzstaaf

Toepassingen	Tips	Instelling van de power ring		
		1	2	3
Scaling	S1, S2, S3	[Blue arrow from 1 to 3]		
Paro	S10, S20, S21R, S21L	[Purple arrow from 1 to 2]		
Onderhoud (Inserts V-tip)	S35+V-Tip (V-P10, V-P11R, V-P11L, V-P12)	[Purple arrow from 1 to 2]		
Restauratief (Voor de preparatie van kroontoppen)	S81D, S82D, S83D, S86D, S71D, S72D	[Teal arrow from 1 to 2]		
Restauratief (Voor minimaal invasief)	S65D, S66D, S67D, S68D	[Yellow arrow from 1 to 2]		
Insert voor V-tip (Endodontie)	S75+V-Tip (V-U15-V-U35)	[Blue arrow from 1 to 2]		

Bovenstaande vermogensstand is standaard. Gelieve op een laag vermogen te starten en het vermogen vervolgens aan de symptomen aan te passen.

Coupling Lineup

	NSK		KaVo®	Dentsply Sirona®
MODEL	S970L	S970	S970KL	S970SL
REF	T1005	T1020	T1013	T1015
Met Licht	●	—	●	●
Koppeling	 NSK Koppelingen		 KaVo® Multiflex®	 Sirona® Quick Coupling

Inhoud
• 3 tips (S1, S2 en S3), een tipsleutel (CR-20) en een tipbeschermer (L)

Wasbaar in een thermodesinfector Autoclaveerbaar

AS2000 Pneumatische scalers

- Trillingsfrequentie : 5.600-6.000 Hz
- Inclusief 3 tips (S1, S2 en S3), een tipsleutel (CR-20) en een tipbeschermer (L)




Zonder licht	MODEL	REF	
—	AS2000 M4	T698	
• Voor Midwest-4-koppeling • Gewicht : 67 g			
Zonder licht	MODEL	REF	 
—	AS2000 B2/3	T697	
• Voor Borden B2/B3-koppeling • Gewicht : 64 g			

Tip Assortiment

NSK beschikt over een uitgebreid gamma van Air Scaler Tips voor klinische toepassingen

NSK beschikt over een uitgebreid gamma van Air Scaler Tips voor klinische toepassingen.

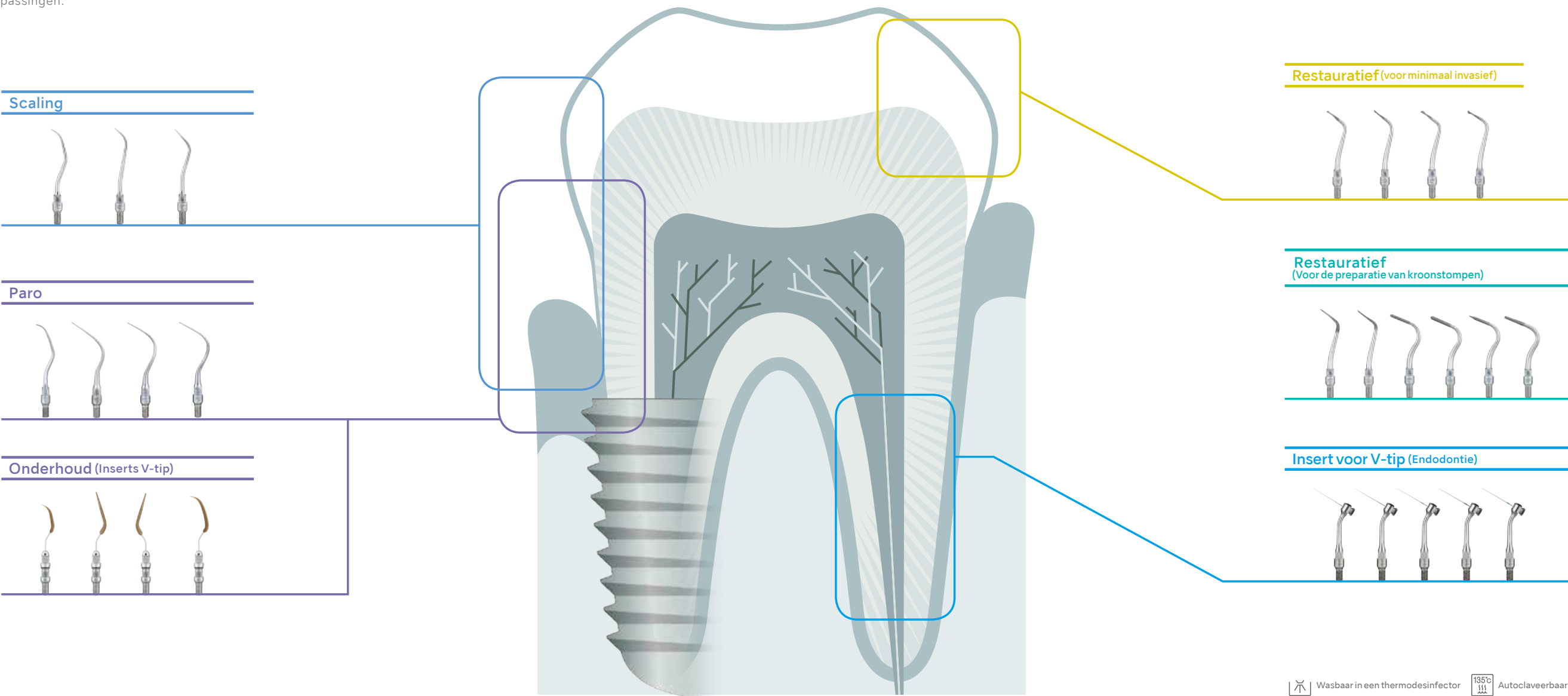

TI-Max S970

Scaling



Verwijdering van supragingivaal tandsteen

Paro




Verwijdering van subgingivaal tandsteen en biofilm




Voor het onderhoud van prothesen, implantaten en restauraties

Detallering en afwerking

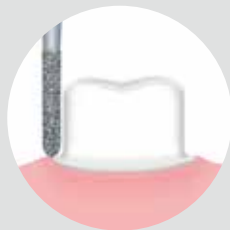

Gebruikt voor de eindafwerking van de randen

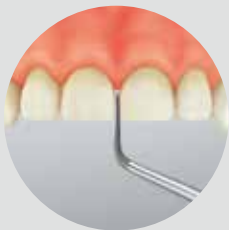

Vorbereiding van de interproximale zones

De tips kunnen gebruikt worden voor afwerking van randen na gebruik van een conventionele boor. Laat toe om zeer precies te werken ook nabij de gingivale sulci, hetgeen niet mogelijk is met draaiende instrumenten. Er zijn 3 modellen beschikbaar : diepe shamfer, lichte shamfer en schouderwerk. De torpedovormige tip is geschikt voor de definitieve vormgeving van een aangrenzende oppervlakterand bij, bijvoorbeeld, fineren. Het beperkte risico op overmatig slijpen en blootliggend dentine maakt meer conservatieve vorming van de aangrenzende oppervlakken mogelijk.





Zie de tipgids voor details.



Poederonderhoud

Voor langdurig mooie en gezonde tanden

De NSK poederonderhoudsbehandeling maakt de contactloze reiniging van afzettingen mogelijk in zones die niet kunnen worden bereikt door de tips van apparaten die rechtstreeks contact maken zoals scalers. Het poederverstuivingsysteem is geschikt voor gebruik boven en onder het tandvlees, en vergemakkelijkt de schoonmaak van de biofilm- en tandsteenresten. De behandeling wordt aanzienlijk verkort en de doeltreffendheid vergroot. Comfortabel voor de arts en de patiënt. De eerste stap naar een nieuwe beleving van de mondhygiëne van NSK.

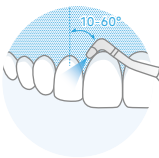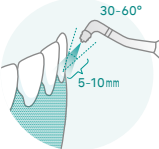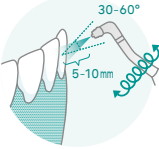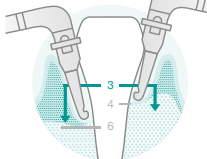Solution	For	At	By	With
Prophy-Mate neo  Verwijdering van verkleuring Verwijdering van biofilm Natuurlijke tand  Supragingivaal   FLASH pear				
Varios Combi Pro  Verwijdering van plaque Verwijdering van biofilm Natuurlijke tand  Supragingivaal (Gingivarand)    Perio Mate Powder				
Perio-Mate  Prothetische tand  Subgingivaal   Perio Mate Powder				

Varios Combi Pro

Prophy-Mate neo / Perio-Mate

Prophy-Mate neo

Poederstraler

Prophy-Mate, het beste polijstapparaat voor prachtige witte tanden

Een supragingivale poederpolijstbeurt is zeer doeltreffend in combinatie met "FLASH pearl." Het unieke dubbele mondstuk van NSK staat garant voor een krachtige poederverstuiving. Dankzij het lange en smalle handstuk en het smalle uiteinde van de spuitmond zijn de zones rond het tandoppervlak veel gemakkelijker te bereiken. De reiniging kan snel worden uitgevoerd, zelfs in interproximale tandzones en moeilijk bereikbare zones. De ergonomisch ontworpen handgreep is comfortabel en maakt een flexibele bediening mogelijk.



Dubbel spraysysteem

Het dubbel spraysysteem zorgt voor een constante vermenging en projectie van het poeder. Dit unieke systeem zorgt voor een regelmatige en nauwkeurige straal die prima reinigt. De krachtige straal reinigt sneller en vermindert de behandel tijd aanzienlijk.



Verwisselbare mondstukken

60° en 80° gebogen mondstukken verkrijgbaar voor een optimale toegang tot de te behandelen zones. Het 60° mondstuk wordt vooral aanbevolen om de molaren te behandelen, dat van 80° voor het anterior gebied.



Dubbele 360° rotatie

Het instrument is 360° draaibaar. De handstukverbinding is zo samengesteld dat u het zelfs bij een hoge druk vrij kunt bewegen.



Snel en eenvoudig aan te sluiten

De Prophy-Mate neo is eenvoudig aan te sluiten op alle bestaande aansluitingen van concurrerende merken. Het handstuk kan met één enkele beweging op de poederhouder worden bevestigd.



Coupling Lineup

	NSK	KaVo®	Dentsply Sirona®	W&H®	Bien Air®	M4	B2
MODEL	PMNG-PTL-P	PMNG-KV-P	PMNG-SR-P	PMNG-WH-P	PMNG-BA-P	PMNG-M4-P	PMNG-B2-P
REF	Y135029	Y135030	Y135031	Y135032	Y135033	Y135034	Y135035
Koppeling	 NSK Koppeling	 KaVo® Multiflex®	 Sirona® Quick Coupling	 W&H® Roto Quick®	 Bien Air® UNIFIX®	 Rechtstreekse aansluiting op MIDWEST 4 slang	 Rechtstreekse aansluiting op de BORDEN 2 slang

Inhoud
• Handstuk met 60° mondstuk • Deksel kamer • Mondstuk 80°
• FLASH pearl cleaning powder 5 zakjes van 15 g • Onderhouds kit

* Geen licht tijdens het gebruik (bij gebruik van de optische koppeling).

 Wasbaar in een thermodesinfector  Autoclaveerbaar
*poederkamer en deksel van poederkamer niet reinigen in de thermodesinfector

FLASH pearl

Reinigingspoeder

Uitstekende reinigingsresultaten met zacht poeder

Niet zout! De impact van het poeder is veel kleiner dankzij zijn delicate smaak. De patiënt kan genieten van een zachte reiniging van de tandoppervlakken. Het geheim achter de intense reiniging en gladde afwerking? De bolvormige deeltjes op basis van calcium. De fijne poederdeeltjes met een gemiddelde grootte van 54 µm die over het tandoppervlak rollen, zorgen voor een minimale beschadiging van het oppervlak en een snelle en efficiënte verwijdering van tandsteen en vlekken. De "FLASH pearl"-behandeling is op korte tijd zeer efficiënt waardoor de patiënt wordt aangemoedigd om regelmatig een mondreiniging te laten uitvoeren.



Elke keer briljante resultaten

FLASH pearl is een reinigingspoeder met kleine korreltjes voor Prophy-Mate neo, dat zacht over het tandoppervlak beweegt en alle hoekjes bereikt, zodat het oppervlak snel en grondig gereinigd wordt. De sferische vorm van de poederkorrels verlaagt de kans op schade aan het tandoppervlak en het zachte weefsel terwijl het vlekken en plaque snel en veilig verwijderd.


☆ Ongewenste reacties op dit product zijn zeldzaam.



Snelle reiniging in nauwe ruimtes

U moet de spuitmond vlakbij het tandoppervlak houden, onder een bijna horizontale hoek (10° tot 60°) gebruiken en precieze bewegingen maken om het poeder over het mondoppervlak te verstuiwen. De brede verstuiwingshoek en de verschillende verstuiwingsbewegingen staan garant voor een soepele bediening en verhogen de efficiëntie.

☆ Gelieve niet rechtstreeks op het tandvlees te richten.

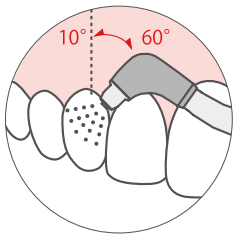

Zonder zout. Zachte bestanddelen. Comfortabel voor de patiënt

Het poeder bestaat voor 94% uit calciumcarbonaat waardoor het comfort van uw patiënt wordt verzekerd en een zoute smaak wordt voorkomen. Het poeder is geschikt voor mensen die een zoutarm dieet volgen.

De kans op verstopping wordt eveneens geminimaliseerd

De fijne poederdeeltjes lossen niet gemakkelijk op in water waardoor verstopping wordt tegengegaan. De apparatuur kan gemakkelijk worden onderhouden omdat het poeder zich niet in de instrumenten ophoopt.



FLASH pearl Reinigingspoeder

MODEL	REF
FLASH pearl	Y900693

- Fraai verpakt in een originele en handige doos
- Bevat 100 zakjes van 15 g



MODEL	REF
FLASH pearl (fles)	Y900698

- Doos met 4 flessen
- Met praktisch deksel, te gebruiken als maatbeker
- Inhoud per fles 300 g poeder

Perio-Mate

Biofilmverwijderaar

Uitgebreid gamma van toepassingen voor supragingivaal en subgingivaal gebruik

Als u de Perio-Mate spuitmond verwijdert, kunt u de subgingivale zone tot 3 mm van de gingivarand, de zone die het meeste onderhoud vergt, gemakkelijk behandelen. Bovendien is het apparaat voorzien van een functie om de poederstroomsnelheid aan te passen aan de omstandigheden van de te behandelen zone en de uit te voeren behandeling. Het apparaat is zowel geschikt voor de snelle en precieze verwijdering van biofilm als voor de zachte en efficiënte verwijdering van biofilm rond implantaten en in delicate tandvleespockets.



Powder Pro Care, Boven en Onder de Gingiva

Efficiënte en professionele tandverzorging De poederonderhoudsapparatuur kan gemakkelijk worden geïntegreerd in andere voorzieningen.

- Het “handige” model kan eenvoudig tijdens het gebruik aan de stoeleenheid worden verbonden.
- De spuitmond is ontworpen met het oog op veiligheid en bruikbaarheid.
- Het poederstroomkanaal is kort om verstopping tegen te gaan.
- Snelle en efficiënte verwijdering van biofilm.


Regeling van het poederstroomvolume

Met de handige Perio-Mate poederafstellersring kan de poederstroom eenvoudig en intuïtief worden afgesteld door snelle aanpassingen met uw vingertoppen. Op deze wijze kunt u de poederstroom niet alleen gemakkelijk regelen en stopzetten, maar ook zonder onderbreking biofilm van het behandelgebied verwijderen.



Soepele 360° rotatie voor een veilige en nauwkeurige bediening

Het handstuk kan gemakkelijk met de vingertoppen worden gedraaid, zelfs tijdens complexe procedures. De mondstuktip maakt moeilijk bereikbare gebieden beter toegankelijk en heeft geen negatieve invloed op aangrenzende tanden en contouren.

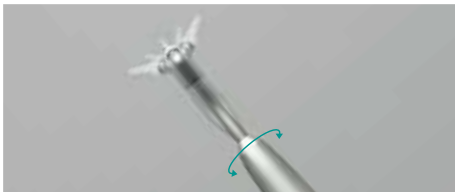

De fijne tip maakt het gebruik in moeilijk bereikbare plaatsen gemakkelijker

De lange, smalle vorm van het mondstuk is ontworpen om gemakkelijk toegang te verlenen tot gebieden waar het handstuk in een hoek moet worden ingebracht, bijvoorbeeld tussen molaren.



Hygiënisch behandelen

De gebruiker kan de spuitmond, het handstuk en de poederbehuizing gemakkelijk demonteren. Poederverstopping is hoogst onwaarschijnlijk bij correcte bediening en onderhoud maar kan, indien nodig, snel worden opgelost met behulp van de informatie in de onderhoudshandleiding en de met het product meegeleverde accessoires. Alle onderdelen van het handstuk (met uitzondering van de spuitmond) mogen herhaaldelijk ultrasoon worden schoongemaakt of in een autoclaaf worden gesteriliseerd.



Coupling Lineup

	NSK	KaVo®	Dentsply Sirona®	W&H®	Bien Air®	M4	B2
MODEL	PER-PTL-P	PER-KV-P	PER-SR-P	PER-WH-P	PER-BA-P	PER-M4-P	PER-B2-P
REF	Y1002654	Y1002655	Y1002656	Y1002657	Y1002658	Y1002659	Y1002660
Koppeling	 NSK Koppeling	 KaVo® Multiflex®	 Sirona® Quick Coupling	 W&H® Roto Quick®	 Bien Air® UNIFIX®	 Rechtstreekse aansluiting op MIDWEST 4 slang	 Rechtstreekse aansluiting op de BORDEN 2 slang

Inhoud
• Handstuk • Poederhouder • Mondstuktip (40 stuks) • Onderhoudskit • Perio Mate poeder 160 g x1

* Geen licht tijdens het gebruik (bij gebruik van de optische koppeling).

Wasbaar in een thermodesinfector 135°C Autoclaveerbaar

*poederkamer en deksel van poederkamer niet reinigen in de thermodesinfector



Supragingivaal

Verwijdering van biofilmplak van de gingivarand
(tot ongeveer 3 mm in de pocket) *maak de spuitmond los

Verwijdering van biofilmplak tussen de tanden en op de gingivarand



Voor




In gebruik

- Verwijdert biofilmplak en kleine vlekken boven en op de gingivarand snel en efficiënt.
- Maakt de verwijdering van tandplak en biofilm mogelijk op moeilijk bereikbare zones: tussen de tanden, in putjes en in spleten.
- Verwijdert kleine, hardnekkige vlekken.
- Reinigt rond tandimplantaten en herstellde prothesen.
- Minder belasting van de tanden en het tandvlees dankzij de contactloze methode.
- Minder belasting van herstellde prothesen.

Snelle en efficiënte verwijderingscapaciteit

Biofilm op het tandoppervlak kan worden verwijderd in ongeveer 50,5 seconden per 1/4 gebit.

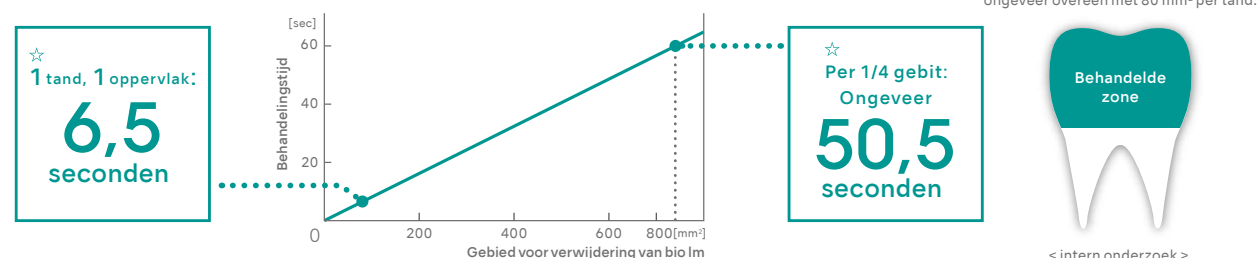


Confocaal lasermicroscopiebeeld van de behandelde zone*


* CLSM Lasertec

Het oppervlak van prothetische restauraties kan worden behandeld zonder ze te beschadigen.


Hybride hard hars

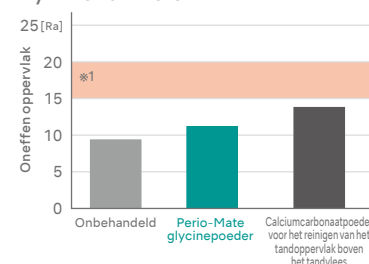

Goud-, zilver- en palladiumlegering

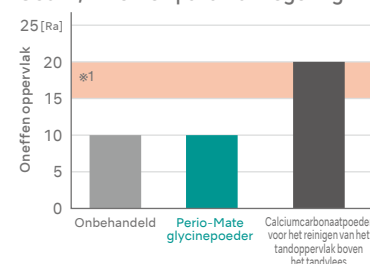


Titaniumlegering

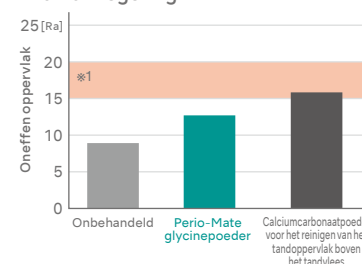

Source: Oral Health Engineering, School of Oral Health Care Sciences, Tokyo Medical and Dental University

*1 Gemiddelde oppervlakte ruwheid van de reguliere Diamond Point

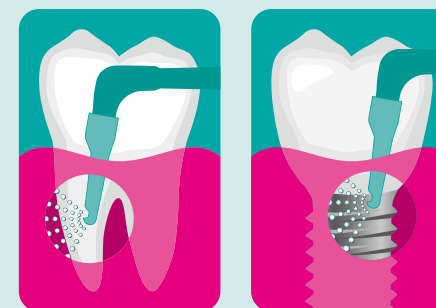

Subgingivaal

Verwijdering van biofilm in tandvleespockets op 3-6 mm onder de gingivarand

Verwijdering van biofilm in de tandpocket



Voor




In gebruik

- De biofilm in de tandvleespocket kan worden verwijderd met een snelheid van ongeveer 60 seconden per kwadrant.
- De afzettingen kunnen worden verwijderd zonder rechtstreeks contact. Er blijven bijna geen resten van de gevormde biofilm of plaqueadhesie over. De resultaten zijn dus zeer positief. Zones die het uiteinde niet kan bereiken, kunnen worden schoongemaakt met de poederuitstootfunctie.
- De poederstroom werd geoptimaliseerd na vloeistofanalyse.
- In vergelijking met andere onderhoudsapparatuur, verwijdert de wijde poederverspreiding meer biofilm en tandplak, ook op onzichtbare zones.
- De zachte poederinjectie staat garant voor de voorzichtige behandeling van de tandvleespocket.
- Dankzij het flexibele ontwerp van de plastic spuitmond is de te behandelen zone gemakkelijker bereikbaar en is een zachte behandeling van de pocket mogelijk.

Snelle en efficiënte verwijderingscapaciteit

De biofilm in de pocket kan worden verwijderd met een snelheid van ongeveer 60 seconden per kwadrant.

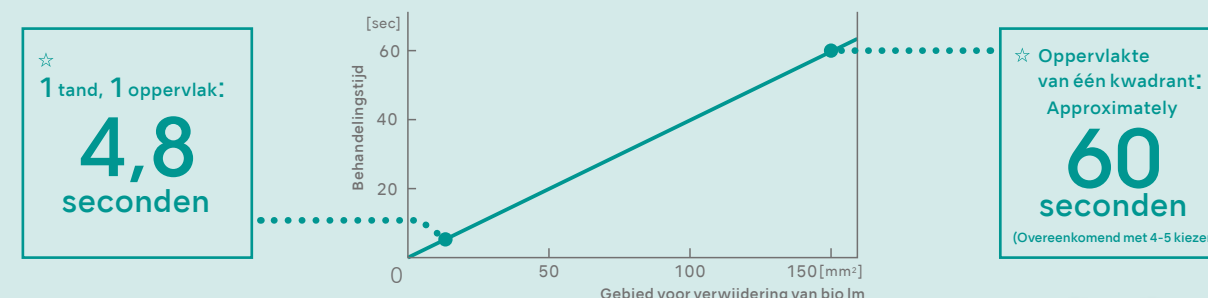

1. Wordt gebruikt voor ondersteunende parodontale behandelingen van pockets met een diepte tot 6 mm die ontstaan door tandvleesaandoeningen. *2
2. Door elke tand gedurende 20 seconden (5 seconde per oppervlak) te besproeien kan subgingivale biofilm in de delicate tandvleespockets worden verwijderd.*2
3. De heen- en weergaande en kleine cirkelbewegingen van de spuitmond zijn essentieel voor de efficiënte verwijdering van biofilm.


*2. Flemmig TF, Hetzel M, Topoll H, Gerres J, Haeberlein I, Petersilka G, Subgingival debridement efficacy of glycine powder air polishing, J Periodontol. 2007 Jun;78(6):1002-10, Petersilka GJ, Steinmann D, Haeberlein I, Heinecke A, Flemmig TF, Subgingival plaque removal in buccal and lingual sites using a novel low abrasive air-polishing powder, J Clin Periodontol. 2003 Apr;30(4):328-33.

Prestaties en Technologie

Reductie van bacterien


Het gebruik van Perio-Mate tezamen met het poeder (op basis van glycine) laat toe om de biofilm radicaal te verwijderen.

Petersilka GJ, Tunkel J, Barakos K, Heinecke A, Häberlein I, Flemmig TF. Subgingival plaque removal at interdental sites using a low-abrasive air polishing powder. J Periodontol. 2003 Mar;74(3):307-11.

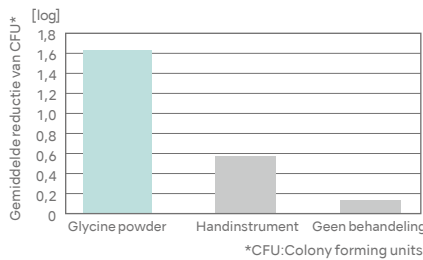


Vergelijking poederdeeltjes


Het fijne Perio-Mate Poeder is ideaal voor de behandeling van parodontale pockets.

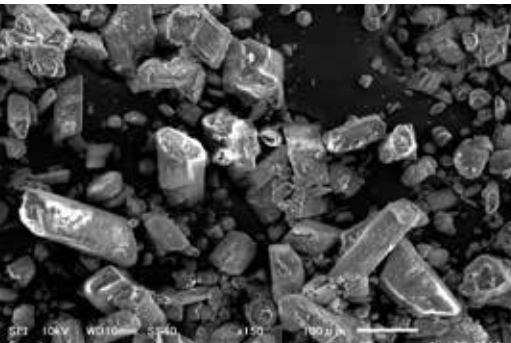

Conventioneel natriumbicarbonaatpoeder
Gemiddelde diameter van een deeltje: 73 µm Rasterelektronenmicroscop, beeldvergroting × 150

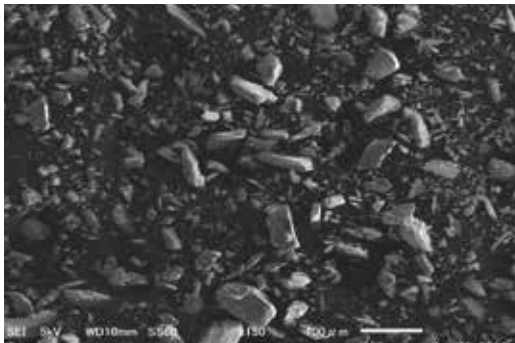

Perio Mate Powder (glycine)
Gemiddelde diameter van een deeltje: 25 µm Rasterelektronenmicroscop, beeldvergroting × 150

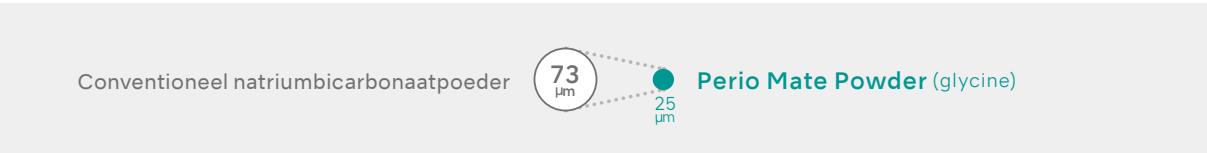

Perio Mate Powder

- Subgingivaal polijstpoeder.
- Het hoofdingrediënt is glycine, een aminozuur dat aanwezig is in proteïnen.
- Goed in water oplosbaar om subgingivale retentie te voorkomen.
- Lagere Mohs hardheid dan dentine.
- *Glycine scoort 2 op de hardheidsschaal van Mohs, voor dentine is dit 2 tot 2,5.
- Gemiddelde diameter van een poederdeeltje is 25 µm.

MODEL	REF
Perio Mate Powder	Y900938

Inhoud
• 2 flessen (160 g)




NSK's innovatieve opzet tips

Het ontwerp van de nieuwe opzettips van NSK betekent gebruik van semi transparant materiaal waardoor de zichtbaarheid bij gebruik toeneemt. De tips zijn voor enkelvoudig gebruik voor verhoogde efficiëntie en veiligheid.



Flexibel plastic mondstuktip-ontwerp verbetert de toegankelijkheid en is zacht voor de parodontale pockets

De slanke mondstuktip heeft precies de juiste mate van flexibiliteit om soepel over tandoppervlakken te bewegen en kan gemakkelijk in nauwe pockets en de worteloppervlakken van aangrenzende tanden worden gebracht zonder dat de patiënt ongemak ondervindt.

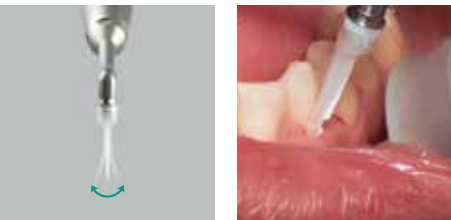

Geoptimaliseerd met behulp van poeder flow-analyse

De turbineontwikkelingstechnologie maakt gebruik van verschillende vloeistofanalyses om 'verstuviging' mogelijk te maken die rekening houdt met de poederstroom in de pocket. De poederstroom verplaatst zich niet in één richting maar in alle richtingen waardoor beschadiging van het zachte weefsel tot een minimum wordt beperkt en subgingivale tandplak en biofilm efficiënt worden verwijderd. Het poeder (lucht) en het water worden afzonderlijk verstoven op het parodontale weefsel.



Perio Mate Nozzle Tip

- Eénmalig gebruik
- Steriel
- Individueel verpakt



MODEL	REF
Perio-Mate mondstuktip	Y1002741

Inhoud
• 40 tips



iProphy

Draadloos Polijsthandstuk

Herneem de Controle

Zonder pedaal en zonder snoer biedt iProphy u bewegingsvrijheid, maximale stabiliteit en totale beheersing bij het polijsten. Optimaliseer uw klinische handelingen en verbeter uw prestaties dag na dag.



Een ultra kleine kop voor een uitgebreid zicht op het operatieveld

De ultrakleine, lange en smalle kop garandeert een duidelijk zicht in de mondholte. Laat toe om zachter en preciezer te werken.

Kracht gemakkelijk te controleren

Controle van de draaikracht met de vingers te controleren. Geen settings met de voet vereist. iProphy behoudt gemakkelijk een lage snelheid wat veel moeilijker is met een standaard polijsthoekstuk.

Licht en handig

Het ergonomisch ontwerp integreert de nieuwste technologieën. Licht, handig en perfect in balans, met dit handstuk kan u op een aangename manier werken, ook bij relatief lange polijstbehandelingen.



Eenvoudige vervanging van de kop

Gemakkelijke uitwisseling van de kop dankzij het snelle fixatiesysteem. De kop kan in 6 verschillende oriëntaties geplaatst worden zodat men zich aan alle omstandigheden kan aanpassen.



Koppen Voor iProphy

MODEL	REF
iFX57	C1102

- Voor prophycupjes screw type
- Reductie 4:1



MODEL	REF
PR-F	H209

- Voor disposable kopjes • Reductie 4:1



Volledige Set iProphy

MODEL	REF
iProphy Complete set	Y1500015

- Inhoud
- Handstuk met motor iProphy • Kop iFX57 • Oplader iProphy
 - adapter • opzetstuk type F

iProphy zonder kop

MODEL	REF
iProphy zonder kop	Y1500069

- Inhoud
- Handstuk met motor iProphy • Oplader iProphy
 - adapter • opzetstuk type F



Hoekstukken

Hoekstukken Prophylaxie




Screw cup polijsten

Ti-Max X



Met Licht	MODEL	REF
☉	X57L	C609
—	X57	C619

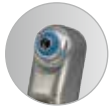

Stofbestendig

- 16:1 Reductie • Max. snelheid : 2.500 min⁻¹
- Titanium behuizing met krasvrije DURACOAT
- Voor schroefbare kegeltjes en borstels
- Rotatie 360° • Zonder spray

FX serie



Met Licht	MODEL	REF
—	FX57m	C1054001



Paste defense system

- 4:1 Reductie • Max. snelheid : 5.000 min⁻¹
- Voor schroefbare kegeltjes en borstels
- Roestvrijstalen behuizing • Rotatie 360° • Zonder spray

EX serie



Koppen	
MODEL	REF
AR-Y (S)	C187
• Max. snelheid : 5.000 min ⁻¹	
• Voor op te schroeven kegeltjes en borsteltjes	
• Rotatie 360°	

Hoekstukken	
MODEL	REF
EC-30	C100008
EC-30M	C100007
• Directe 1:1 Aandrijving	

MODEL	REF
AR-Y (K)	C188
• Max. snelheid : 5.000 min ⁻¹	
• Voor opklikbare kegeltjes • Rotatie 360°	

MODEL	REF
ER4	C634
ER4M	C634002

- 4:1 Reductie

EVA tip polijsten

Ti-Max X



Met Licht	MODEL	REF
☉	X55L	C608
—	X55	C618



Met tip lock mechanism

- 4:1 Reductie • Max. snelheid : 10.000 min⁻¹
- Titanium behuizing met krasvrije DURACOAT • Enkelvoudige Spray
- Voor Profin Tip / Eva Tip / Orthodontische vijlen (schacht ø2,36-2,40 mm)*
- Alternierende beweging (beweging : 1,4 mm)
- *Schacht van metaal kan niet gebruikt worden.

EX serie



Koppen	
MODEL	REF
EVA-Y	C235
• Max. snelheid : 10.000 min ⁻¹	
• Voor EVA-inserts	
• Alternierende beweging (beweging : 1,4 mm)	

Hoekstukken	
MODEL	REF
ER4	C634
ER4M	C634002
• 4:1 Reductie	

Losse Onderdelen

Varios Combi Pro

MODEL	PRODUCTEN	REF
Kamer voor Prophy gebruik		U1135018
Kamer voor Prophy gebruik		U1135019
Slang Handstuk voor Prophy gebruik		T1051001
Slang Handstuk voor Perio gebruik		T1053001
Instrument voor Prophy gebruik		T1074001
Instrument voor Perio gebruik		T1077001
Opzetstuk voor Prophy gebruik		T1074012
Opzetstuk voor Perio gebruik		T1077012
VCP Flessenset Fles en Deksel		U1135017
VA2-LUX-HP Handstuk met licht		E351050
VA2LUX-SC Snoer handstuk voor VA2LUX		E351054

MODEL	PRODUCTEN	REF
FC-79 Voetbediening		Z1256001
Set Waterfilter 3,6 m		U1135078
Klep ter Reductie van Waterdruk		U1135093
Irrigatiepomp		U1135079
O-ring set Camber Base Connector (Set van 5)		Y1003435
Deksel Kamer		U1135089
Dichtingsring Voor Deksel Kamer		Y1003545
O-ring set Fles Irrigatie		Y1003544
O-ring 1 voor snoer Handstuk		Y1003546
O-ring set Handstuk Slang		Y1003500
O-ring set Opzetstuk		Y1003501

MODEL	PRODUCTEN	REF
Luchtslang 3,6 m		D0914406 036
Sleutel voor Opzetstuk		T1074601
Opzettip Perio-Mate (Set van 40)		Y1002741
Opzettip Sleutel		T1043751
Smeerolie		Z016112
Draad Voor Reiniging (L)		T798091
Draad Voor Reiniging (S)		T798095
Veil Voor Reiniging		T798092
Borstel Voor Reiniging		T798093
Instrument voor ontsluiten		U1135256

Prophy-Mate neo

MODEL	PRODUCTEN	REF
PMN-HP Handstuk met 60° mondstuk		T797010
Opzetstuk 60°		T797012
Opzetstuk 80°		T797013
O-ring neo Mondstuk achteraan		D0312029 070

MODEL	PRODUCTEN	REF
Opzetstuk voor doorblazen-PTL neo		T798094
Opzetstuk voor doorblazen-KV neo		T886094
Opzetstuk voor doorblazen-SR neo		T887094
Opzetstuk voor doorblazen-WH neo		T888094

MODEL	PRODUCTEN	REF
Opzetstuk voor doorblazen-BA neo		T889094
Opzetstuk voor doorblazen-M4 neo		T884094
Opzetstuk voor doorblazen-B2 neo		T885094

Perio-Mate

MODEL	PRODUCTEN	REF
PER-HP		T1043010
Opzetstuk		T1043012
O-ring PER Mondstuk achteraan		D0312023 060
Opzettip Sleutel		T1043751

MODEL	PRODUCTEN	REF
Opzetstuk voor doorblazen-PTL PER		T1042094
Opzetstuk voor doorblazen-KV PER		T1044094
Opzetstuk voor doorblazen-SR PER		T1046094
Opzetstuk voor doorblazen-WH PER		T1048094

MODEL	PRODUCTEN	REF
Opzetstuk voor doorblazen-BA PER		T1050094
Opzetstuk voor doorblazen-M4 PER		T1052094
Opzetstuk voor doorblazen-B2 PER		T1054094

Varios 970 / 570 / 370 / 170

MODEL	PRODUCTEN	REF
VA2-LUX-HP Handstuk met licht		E351050
VA2-HP Handstuk zonder licht		E350050
VA970LUX-SC Snoer Handstuk met licht voor Varios 970 LUX		E351055
VA970-SC Snoer Handstuk zonder licht voor Varios 970		E350055
VA170LUX-SC Snoer Handstuk met licht voor Varios 170 LUX		E351056
VA170-SC Snoer Handstuk zonder licht voor Varios 170		E350056
FC-70 Voetbediening (2,5 m)		Z1008001
FC-71 Voetbediening (5 m) voor Varios 370		Z1008002
AC Adapter (2 m) voor Varios 570		Y1001762

MODEL	PRODUCTEN	REF
VA370/370Lux AC Adapter (5 m)		Y1001790
Snelkoppeling water		U387030
Set Waterfilter (2m) 2 pipe water supply, water filter, water filter compartment		U387040
Set Waterfilter (4m) Voor Varios 370 2 pipe water supply, water filter, water filter compartment		U1007080
Slang voor WATERaanvoer (2m)		U387580
Slang voor WATERaanvoer (4m) Voor Varios 370		D0914406 040
Behuizing Waterfilter		Y900069
Buisring (Set van 2)		Y900077
Handstukhouder voor Varios 370		10001505

MODEL	PRODUCTEN	REF
VA Fles 400 (400 mL) voor Varios 970		Z1047002
Irrigatiepomp voor Varios 970		10000643
O-ring voor snoer handstuk		D0310020 080
O-ring Smalle Sectie voor VA Fles 400		D0312090 100
O-ring Brede Sectie voor VA Fles 400		D0310075 150
Houder Varios 350/370		Z254
Varios 350/370 Montagearm		Z259
Steun voor controleunit voor Varios 370		Y1001812

Prophy-Mate neo / Perio-Mate

MODEL	PRODUCTEN	REF
Deksel Reservoir		T798133
O-ring		T798135
O-ring Mondstuk vooraan		D0312039 070
Sleutel voor Opzetstuk		T797601

MODEL	PRODUCTEN	REF
Set PTL O-ringen (Set van 5)		Y900580
Set PM O-ringen (Set van 3)		Y900054
Smeerolie		Z016112
Draad Voor Reiniging (L)		T798091

MODEL	PRODUCTEN	REF
Draad Voor Reiniging (S)		T798095
Veil Voor Reiniging		T798092
Borstel Voor Reiniging		T798093

Ti-Max S970 / AS2000 Pneumatische scalers

MODEL	PRODUCTEN	REF
CR-20 Houder voor Inserts		Z1090001
E-tip Vervang sleutel		Z217399

MODEL	PRODUCTEN	REF
Tiphouder		Z252080
Tipbescherming L		Z217850

MODEL	PRODUCTEN	REF
Tipbescherming S		Z217851
S970 Set O-ringen (Set van 4) Voor S970		Y1001953

iProphy

MODEL	PRODUCTEN	REF
Handstuk met motor iProphy		EA11170020
Oplader iProphy		UA10910020

MODEL	PRODUCTEN	REF
Adapter		Y1500014
Pack batterijen		E1080052

MODEL	PRODUCTEN	REF
Opzetstuk type F		Z256090

Varios Combi Pro / Varios 970 / 570 / 370 / 170

MODEL	PRODUCTEN	REF
Waterfilter		U387042
CR-10 Houder voor Inserts		Z221076
E-tip Vervang sleutel		Z217399

MODEL	PRODUCTEN	REF
Tiphouder		Z221080
Tipbescherming L		Z217850
Tipbescherming S		Z217851

MODEL	PRODUCTEN	REF
Sterilisatiecassette		Z1035001
Spansleutel 5x8 (Set van 2)		Y1001301

Professionele Verzorging

De keuze van het juiste materiaal is zeer belangrijk in de professionele verzorgingssector

De professionele mondverzorging omvat behandelingen voor de preventie en genezing van tandvleesaandoeningen, subgingivale scaling, de verwijdering van pathogene bacteriën, de verwijdering van biofilm, de preventie van cariës door tandplakvorming tegen te gaan, en de verwijdering van vlekken, nicotine en teer om de tanden hun natuurlijke glans terug te geven. Een volledige en professionele verzorging vereist kwaliteitsapparatuur om een geschikte en efficiënte tandheelkundige behandeling op maat van de patiënt te kunnen garanderen.



Kavo en Multiflex zijn geregistreerde handelsmerken van Kavo Dental GmbH
Dentsply Sirona en Sirona zijn geregistreerde handelsmerken van Dentsply Sirona Inc.
W&H en Rotoquick zijn geregistreerde handelsmerken van W&H Deutschland GmbH.
Bien Air en UNIFIX zijn geregistreerde handelsmerken van Bien-Air Holding SA.