

## Teinte Universal Body



**4733 – Transcend *Seringue UB 1 unité***  
1 seringue de 4 g en teinte Universal Body

**4734 – Transcend *Seringue UB 4 unités***  
4 seringues de 4 g en teinte Universal Body



**4757 – Transcend *Unidoses UB 10 unités***  
10 unidoses de 0,2 g en teinte Universal Body

**4817 – Transcend *Unidoses UB 40 unités***  
40 unidoses de 0,2 g en teinte Universal Body

## Teintes complémentaires



**Transcend *Seringue 1 unité***  
Seringue de 4 g

| Dentine | 1 unité | Émail | 1 unité |
|---------|---------|-------|---------|
| A1D     | 4727    | EN    | 4731    |
| A2D     | 4728    | EW    | 4732    |
| A3D     | 4729    |       |         |
| B1D     | 4730    |       |         |



**4726 – Transcend *Kit d'introduction Seringues***  
1 seringue de 4 g de chaque teinte :  
A1D, A2D, A3D, B1D, EN, EW, UB



**Transcend *Unidoses 10 unités***  
10 unidoses de 0,2 g

| Dentine | 10 unités | Émail | 10 unités |
|---------|-----------|-------|-----------|
| A1D     | 4744      | EN    | 4748      |
| A2D     | 4745      | EW    | 4749      |
| A3D     | 4746      |       |           |
| B1D     | 4747      |       |           |



**4814 – Transcend *Kit d'introduction Unidoses***  
10 unidoses de 0,2 g de chaque teinte :  
A1D, A2D, A3D, B1D, EN, EW, UB

RÉFRIGÉRER



**3059 - Composite Wetting Resin *Seringue 2 unités***  
2 seringues de 1,2 ml

Associez Composite Wetting Resin à n'importe quel composite d'Ultradent Products pour améliorer le glissement de l'instrument sur le composite pendant l'application et la mise en forme.

**TRANSCEND™**  
UNIVERSAL COMPOSITE

# Restaurations avec UNE SEULE TEINTE

Restauration avec une seule teinte et sans utiliser de teinte de blocage




Avant

Dyschromie liée  
à l'amalgame

Immédiatement  
après

2 ans postop.

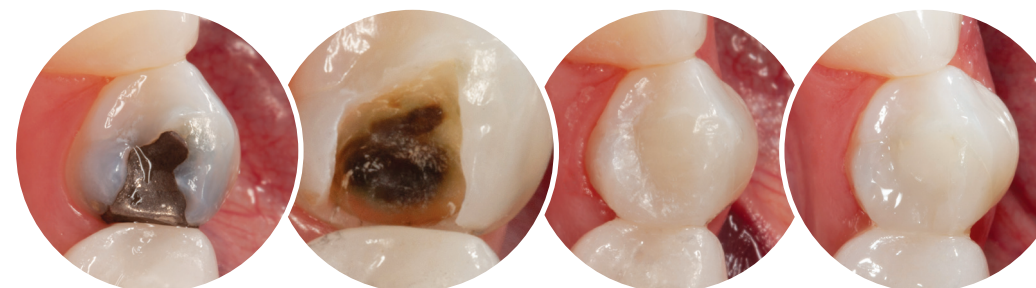

Avec l'aimable autorisation du Dr Jaleena Jessop.

Le patient s'est présenté avec une carie récurrente sur une restauration à l'amalgame sur la 44. La dent a été restaurée avec le composite Transcend en teinte Universal Body. Le composite Transcend en teinte Universal Body étant suffisamment opaque pour masquer la dyschromie liée à l'amalgame tout en se fondant dans la teinte des dents naturelles, aucun opaqueur n'a été utilisé.


## Transcend™ Universal Composite

Le composite universel Transcend est un matériau composite innovant utilisé pour les restaurations directes et indirectes dans les régions antérieure et postérieure. Il permet une correspondance des teintes sans précédent, avec une seule teinte Universal Body, grâce à sa technologie brevetée Resin Particle Match™, qui élimine la nécessité d'une teinte de blocage ou d'un opaquer pour masquer les teintes plus foncées sous-jacentes.

- Excellentes propriétés mécaniques et optiques
- Consistance idéale, facile à sculpter<sup>1</sup>
- Haute polissabilité<sup>1</sup>
- Fluorescence identique à celle de la dent naturelle<sup>1</sup>

| Présentation technique <sup>1</sup> |              |
|-------------------------------------|--------------|
| Rétraction de polymérisation        | 1,6 %        |
| Résistance à la compression         | 450,7 (MPa)  |
| Dureté                              | 60,3 (HK)    |
| Résistance à la flexion             | 156,17 (MPa) |
| Module d'élasticité en flexion      | 11,85 (GPa)  |
| Radio-opacité                       | 3,2 (mm-Al)  |
| Profondeur de polymérisation        | 2,85 (mm)    |
| % de charge en volume               | 60-61 %      |
| % de charge en poids                | 79 %         |

RESIN PARTICLE MATCH

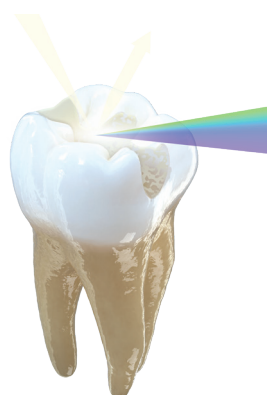


## Composie à la technologie REVOLUTIONNAIRE

La formule nanohybride du composite Transcend a été développée avec la technologie Resin Particle Match d'Ultradent. Les indices de réfraction équilibrés entre la résine et les particules de charge obtenus avec cette technologie, associés à un équilibre soigneusement optimisé entre la translucidité et de l'opacité, permettent au composite Transcend de se fondre dans la plupart des structures dentaires environnantes avec une seule teinte et sans teinte bloquante/opaqueur.<sup>1</sup>

## De magnifiques résultats, tout simplement, POUR TOUTES LES RESTAURATIONS

Outre la teinte Universal Body, le composite Transcend propose également quatre teintes dentine et deux teintes émail pour les cas où une technique de stratification est indiquée.

Pour la reconstruction des dents antérieures présentant une différence notable de teinte entre les zones cervicales et incisives (zones opaques et translucides) et/ou pour les restaurations importantes (tels les cas d'importantes cavités de classe III et de classe IV avec une structure dentaire insuffisante en utilisant comme base la teinte Universal Body), il est possible d'obtenir de magnifiques résultats au moyen de la stratification des teintes supplémentaires dentine et émail.

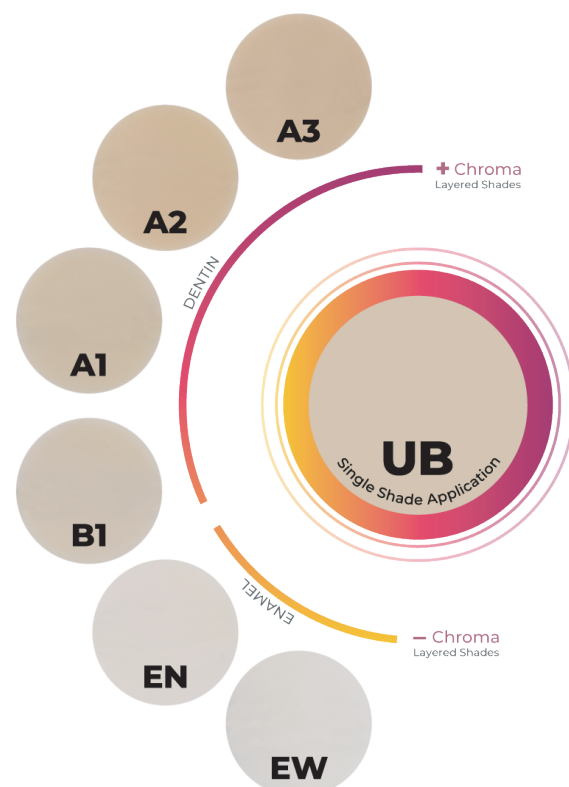

## En harmonie permanente avec LA STRUCTURE DENTAIRE ENVIRONNANTE


Les images suivantes d'une dent restaurée avec le composite Transcend montrent que la teinte Universal Body a la capacité de s'adapter pour continuer à se fondre harmonieusement dans le tissu dentaire qui l'entoure au cours de la procédure d'éclaircissement.<sup>2</sup>



La restauration continue de s'adapter à des teintes plus claires à mesure que le patient applique le traitement d'éclaircissement dentaire Opalescence™.

## Restauration collée directe

Le patient s'est présenté avec une restauration composite défectueuse. L'obturation a été retirée, ce qui a révélé la dyschromie due à l'amalgame ainsi qu'une fissure mésiale. La fissure mésiale était toutefois de petite taille et facile à prendre en charge, ce qui a permis de réaliser une restauration directe collée au lieu d'une restauration prothétique indirecte. Produits utilisés : agent de mordantage Ultra-Etch™ et adhésif Peak™ Universal Bond. Une très fine couche de composite fluide PermaFlo™ en teinte A3 a été appliquée en couche initiale. Le composite Transcend en teinte Universal Body a été utilisé pour restaurer la dent. Le composite a été réglé en fonction de l'occlusion puis magnifiquement poli.

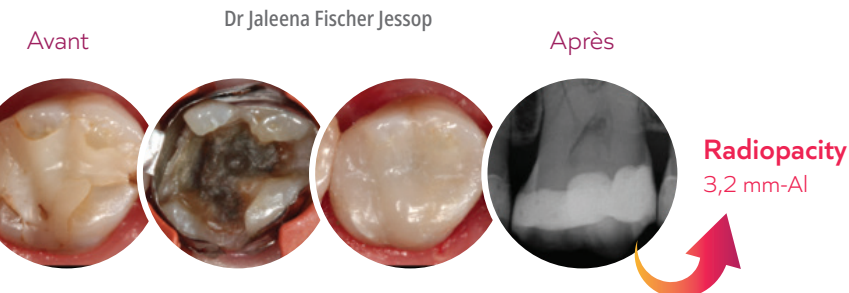

## Pas de coloration ni de stratification

Le patient s'est présenté avec une dyschromie sur une restauration défectueuse disto-vestibulaire sur la 11 et méso-vestibulaire sur la 12. Carie secondaire sous la 12. Récession gingivale à l'origine du triangle noir visible. Les restaurations défectueuses et la carie ont été éliminées. Une dentine jaunâtre plus foncée est visible dans la région cervicale. Présence d'émail translucide. La préparation a été mordancée puis collée selon les instructions du fabricant. Le composite Transcend teinte Universal Body a été appliqué pour réduire l'espace interdentaire. Le composite Transcend est capable d'imiter la teinte des structures dentaires environnantes. Aucune personnalisation ni stratification n'a été nécessaire.

Dr Adrian Goh



## Restauration efficace d'une molaire mandibulaire

Le patient s'est présenté avec une restauration composite défailante. L'obturation a été déposée. Les deux molaires mandibulaires ont été restaurées efficacement à l'aide du composite Transcend Universal Body. A noter la parfaite intégration de la teinte du composite Transcend Universal Body à la structure dentaire sur la paroi vestibulaire de la première molaire.

Dr. Rafael Beolchi



## Transcend(e) la concurrence

Scannez le code QR pour découvrir la façon dont Transcend™ et sa technologie Resin Particle Match™ fonctionnent.

